

TRIAD

Fauteuil d'hémodialyse, oncologie et chimiothérapie

Configuration TRIAD Indispensable

Caractéristiques incluses:

- » Poignées de transport fixes
- » Repose-pieds ajustable électrique
- » Roues doubles de 12,7 cm / 5" avec frein central
- » Interrupteur à main
- » Appuis-bras pivotants, synchronisés avec le dossier
- » Trendelenburg électrique 8,8 sec
- » Coussins moulés sans coutures
- » Repose-nuque

Configuration TRIAD Confort

Caractéristiques incluses:

- » Configuration TRIAD Indispensable
- » Tablette pivotante de 43,2 x 33 cm / 17" x 13" pouvant s'installer à droite ou à gauche du patient
- » Interrupteur au pied pour positionner le patient en Trendelenburg d'urgence tout en ayant les mains libres pour effectuer des manœuvres
- » Batterie rechargeable

Options supplémentaires disponibles

- » SEP-01 : Plaques de fermeture
- » SHELF-TAB : Tablette de 15,2 x 30,5 cm / 6" x 12" positionnée sur chaque appui-bras
- » FC-2 : Pédales de frein central à l'arrière seulement
- » FRT-2 : Crédit pour enlever le reposer-pieds électrique

Accessoires

- » CU6-FR-TRIAD : Coussin reposer-pieds pour personnes de petite taille
- » MEBT : Mini vélo d'exercice qui peut être installé sur le reposer-pieds permettant au patient de faire de l'exercice pendant le traitement

Spécifications

Ajustements

- Hauteur: 51 à 71 cm / 20" à 28"
- Dossier: 0° à 80°
- Reposer-pied: 15,2 cm / 6"
- Jambes: 0° à -50°
- Trendelenburg: -10°

Capacité maximale

- 205 kg / 450 lb utilisant des composantes électriques de grade hôpital munies de la meilleure garantie
- 120V - 3.9 AMP - 60 Hz

Dimensions

- Standard: 61 x 195,6 cm / 24" x 77"
- Appui-bras: 48,9 x 18,4 cm / 19,25" x 7,25"

Coussins

- Moulés pour plus de confort et durabilité
- Sans coutures pour faciliter la prévention des infections

Interrupteur

- À main 5 fonctions

Roues

- Doubles de 12,7 cm / 5" avec frein central



TRIAD

Fauteuil d'hémodialyse, oncologie et chimiothérapie

904-9000-FRA RT / Copyright © 2023 IBIOM / Umamo Medical Inc. 2023 / Imprimé au Canada



Umamo Medical Inc.
230, boulevard Nilus-Leclerc
L'Islet QC G0R 2C0 CANADA

418 247-3986 info@ibiom.com
1 877 247-7494 ibiom.com



ibiom.com

TRIAD Fauteuil d'hémodialyse, oncologie et chimiothérapie

Réduit le temps de manipulation en améliorant le confort et la sécurité.

Le fauteuil est muni de coussins confortables, conçus pour réduire les points de pression tout en maintenant un support lombaire. Le siège est également conçu pour aider le patient à rester bien en place dans une bonne position pendant le traitement. Les coussins sont entièrement moulés et sans couture avec de la mousse de viscosité injectée.

Nettoyage: Le revêtement de vinyle est testé pour les produits de nettoyage courants utilisés par les hôpitaux et les cliniques. Il résiste à l'Oxivir et au Virox; impératif lorsque le contrôle des infections est une priorité.



Ensemble de batterie rechargeable.

Ajustable en hauteur de 51 à 71 cm / 20 à 28".

Le repose-pieds à réglage électrique permet au patient de s'occuper lui-même du soulagement des crampes

Ajustement électrique de 15,2 cm / 6".
Ajustement mécanique de 7,6 cm / 3".

Capacité maximale: 205 kg / 450 lb
utilisant des composants électriques de grade hôpital.
120V - 3.9 AMP - 60 Hz.

Facilement manœuvrable, la table pivotante est amovible et peut s'installer d'un côté ou de l'autre.

Repose-tête confortable fait de mousse de viscosité injectée.

La poignée de transport protège également le coussin des chocs.

Les bras peuvent pivoter et se soulever pour un accès facile. Ils sont synchronisés avec le dossier pour plus de confort pour le patient.

Ils peuvent pivoter à l'intérieur pour que les patients plus petits puissent les utiliser confortablement.

Plaque de fermeture.

Facile à utiliser depuis les 4 extrémités, le système de frein central utilise des roues doubles de 12,7 cm / 5".

12,7 cm / 5" d'espace libre pour faciliter l'utilisation d'un levier.

Couleurs standards:

- Sky Blue
- Gunmetal

Commande spéciale:

- Cobalt
- Wedgewood
- Desert Rose
- Ash




Entièrement conçu et fabriqué au Québec, IBIOM vous offre un accès facile aux pièces de rechange et un service à la clientèle en français et en anglais.



Contrôle au pied d'urgence pour positionner le patient en Trendelenburg tout en gardant les mains libres.



Positionner le fauteuil en Trendelenburg -10° se fait sans effort et ne nécessite que 8,8 sec.

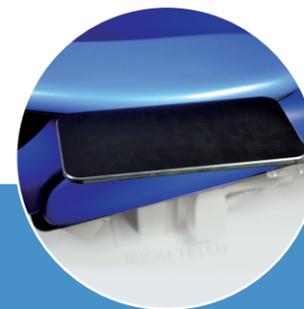

Tablette rétractable fixée à l'appui-bras.



Coussin repose-pieds pour personnes de petite taille.



Interrupteur à main 5 fonctions facile à utiliser.



Mini vélo d'exercice qui peut être installé sur le repose-pieds pour faire de l'exercice pendant le traitement.