

# ECHO-FLEX 5002

Pour échographie générale

## OPTIONS INCLUSES :

- ✓ Système de frein central.
- ✓ Interrupteur à main triple rétroéclairé.
- ✓ Matelas de 3 po.
- ✓ Trendelenburg.
- ✓ Trendelenburg inversé.
- ✓ Courbe IBIOM de 3 po du côté droit.

## OPTIONS DISPONIBLES :

- BAT-ECHO : Batterie rechargeable.
- B0-3 : Panneau de boutons triple.
- CS-24 : 24 po x 9 po côtés sécuritaires rétractables.
- MA-4T : Matelas de 4 po.
- PD-1S : Interrupteur au pied simple.
- PD-1 : Interrupteur au pied double.
- PD-3LIN : Interrupteur au pied triple.
- PP-1 : Poignées de transport rétractables.
- PR-5 : Panier de rangement.
- PT-6 : Tige à soluté en acier inoxydable.
- SP-1 : Support à papier.
- TP-1 : Poignées de transport fixes.
- TR-1 : Ouverture triangulée pour examen endo-vaginale dans un matelas de 4 po.

## SPÉCIFICATIONS

### AJUSTEMENTS

- Hauteur : 21 po à 37 po.
- Dossier : 0° à 80°.
- Trendelenburg: ± 15°.

### CAPACITÉ MAXIMALE

- 450 lb utilisant des composantes électriques de qualité supérieures munies de la meilleure garantie. 120V - 4.0 AMP - 60 Hz.

### DIMENSIONS

- Largeur standard : 27 po x 76 po.

### CÔTÉS SÉCURITAIRES

- Rétractables 24 po x 9 po.\*

### MATELAS

- 3 po d'épaisseur.
- 4 po d'épaisseur.\*
- Revêtement de vinyle résistant à l'Oxivir et au Virox.

### INTERRUPTEUR

- À main, 3 fonctions et rétroéclairé.
- Panneau de boutons triple.\*
- Interrupteur au pied.\*

### ROUES

- Doubles 5 po avec système de frein central.

### GARANTIE À VIE


- Vous pouvez faire confiance à notre structure facile à nettoyer et à nos soudures GARANTIES À VIE.

\* Optionnel.



# ECHO-FLEX 5002

Pour échographie générale

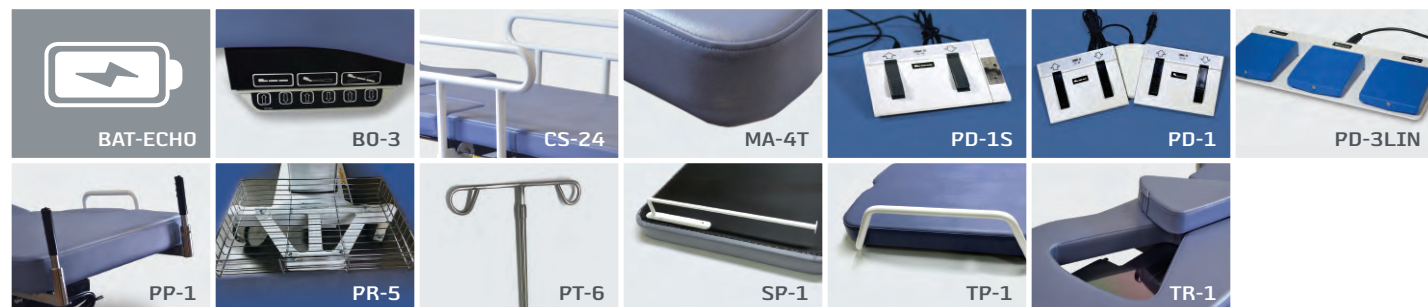

670, rue Joseph-Louis Mathieu  
Sherbrooke (Québec) Canada J1R 0X3

info@ibiom.com  
1 877 563-5777

www.ibiom.com

COPYRIGHT © 2019 IBIOM INSTRUMENTS // TOUS DROITS RÉSERVÉS



www.ibiom.com

# ECHO-FLEX 5002

## Pour échographie générale



Améliore la performance lors des examens. Réduit le travail en hyperextension, les blessures professionnelles et les arrêts de travail. Facilite le positionnement ergonomique grâce à un interrupteur à main rétroéclairé.

**Nettoyage :** Le revêtement de vinyle est testé pour les produits de nettoyage courants utilisés par les hôpitaux et les cliniques. Il résiste à l'Oxivir et au Virox.

### Couleurs standards :

-  DU-201
-  DU-100

### Commande spéciale :

-  DU-150
-  US-429
-  Autres couleurs sur demande



Entièrement conçu et fabriqué au Québec, IBIOM vous offre un accès facile aux pièces de rechange et un service à la clientèle en français et en anglais.



[www.ibiom.com](http://www.ibiom.com)

IBIOM propose une courbe de 3 po de profondeur qui permet aux professionnels de la santé de travailler plus près du patient tout en conservant une position ergonomique lors d'un examen.

Protège le matelas et vos murs lors du déplacement de la civière.

Support à papier disponible.

Système de frein central facile à utiliser avec roues doubles de 5 po.

Capacité maximale : 450 lb utilisant des composants électriques de qualité supérieures munies de la meilleure garantie. 120V - 4.0 AMP - 60 Hz.

Les côtés de 24 po entièrement rétractables utilisent un mécanisme solide et sûr pour assurer la sécurité de vos patients.

Vous pouvez faire confiance à notre structure facile à nettoyer et à nos soudures **GARANTIES À VIE.**

Option : le panneau de commande à boutons peut être fixé sur le côté de la civière, ce qui permet d'éviter l'encombrement par les câbles.

Interrupteur à main rétroéclairé à 3 fonctions inclus.

Le dossier propose un ajustement de 0 à 80° à l'aide de l'interrupteur à main.

Aide les patients à se déplacer sur la civière facilitant leur positionnement.

Ajustable en hauteur de 21 à 37 po.

5 po d'espace libre pour faciliter l'utilisation d'un levier.

Fait d'acier inoxydable, la tige à soluté réglable peut être installé de chaque côté.

Des poignées de transport fixes ou rétractables sont disponibles pour faciliter la manipulation de la civière.

### URGENCE

Cette civière propose les positions Trendelenburg et Trendelenburg inversé  $\pm 15$  degrés.

Option : Interrupteur au pied simple, double ou triple pour conserver les mains libres durant l'ajustement.

